

 **Alma Hybrid™**
СТАНЬТЕ МАЙСТРОМ СВОЄЇ СПРАВИ



ПЕРЕМОЖЕЦЬ 2021 р.

**ЄВРОПЕЙСЬКА
ПРЕМІЯ
ЗА ДИЗАЙН
ВИРОБУ**

IDA
БРОНЗОВИЙ
ПЕРЕМОЖЕЦЬ
НАГОРОДИ
ЗА ДИЗАЙН
2021 р.

AMWC
Aesthetic Medicine
AWARDS



Переможець



Представлення Alma Hybrid™



З глибокою вдячністю за вашу справу, ретельність, яку вона вимагає, і багаторічний досвід, необхідний для того, щоб по-справжньому опанувати її, Alma створила основний інструмент для того, щоб забезпечити Вас всім необхідним
для справжнього перетворення, тим, що змушує людей з кожним днем відчувати себе і виглядати краще.

Досягаючи рівноваги

Стильне рішення «Alma Hybrid™» (Альма Хайбрід), яке є раціональним і ультрасучасним як в дизайні, так і в можливостях, використовує авангардний підхід до медичних та естетичних дерматологічних процедур.

На основі технологій, самостійно розроблених нашою шанованою в професійних колах інноваційною командою, «Alma Hybrid™» є **першим і єдиним пристроєм такого типу, який об'єднує 3 потужні енергії** в унікальному поєднанні, яке забезпечує безпрецедентні результати зі значним скороченням часу простою.

Пропонуючи безмежні варіанти і максимальний контроль, що виходить далеко за рамки стандартного фракційного лазера, «Alma Hybrid™» дозволяє визначити кожен аспект процедури для абсолютно нової, **небаченої раніше концепції омолодження шкіри і лікування рубців.**

Існує тонка грань між природною і вдосконаленою красою. Наша місія полягає в пошуку балансу між повагою до природи і вшануванням її, пропонуючи вдосконалення, які розширюють можливості людей і змушують їх відчувати себе щасливішими і впевненішими.

Святий Грааль естетичних процедур полягає в забезпеченні максимального ефекту з мінімальним часом простою. З «Alma Hybrid™» ми досягли ідеального балансу.





Поєднання, що перемагає

Будучи розробленим для широкого спектру абляційних і неабляційних процедур, «Alma Hybrid™» поєднує в собі потужність 3-х основних енергій, створюючи унікальний синергетичний ефект.

CO₂ Лазер CO₂ – оптимальна суміш абляційного, коагуляційного і теплового ефекту для ефективного, високоточного фокусування або для проведення процедур з використанням фракційного лазера.

1570 нм лазер – потужний неабляційний лазер, який створює тепловий ефект, що сприяє синтезу нової дерми, залишаючи при цьому епідерміс неушкодженим.

«ІМПАКТ™» (ІМПАКТ) для трансепідермальної доставки (TED) – наша запатентована ультразвукова технологія створює акустичний тиск, який покращує трансепідермальну доставку косметичних засобів в шкіру через мікроканали, створені лазером CO₂.

На додаток до цього потужного поєднання, інтелектуальне програмне забезпечення служить інструментом, який приносить користь як лікарю, так і пацієнту, пропонуючи матрицю варіантів, включаючи тип шкіри, оброблювану область та інші параметри, для того, щоб забезпечити повне налаштування кожної процедури для кожного конкретного пацієнта.


Alma Hybrid™

Інструменти майстра своєї справи

HyGrid™ - Ідеальне налаштування


В основі платформи «Alma Hybrid™» лежить «HyGrid™» – унікальна для «Alma» функція, яка гарантує вам максимальну вигоду від ефекту нашого унікального поєднання технологій.

Досі представлені на ринку лазерні пристрої для проведення медичних та естетичних процедур створювали мікроканали в шкірі, які є абляційними або неабляційними. Безпечний, точний і універсальний «HyGrid™» надає Вам перевагу лазерів CO₂ і 1570 нм в одному аплікаторі, що забезпечує можливість персоналізованого програмування коефіцієнта корисної дії абляції/неабляції шкіри в матриці точних пропорцій, необхідних для оптимального балансу між результатами і часом простою для кожного конкретного пацієнта відповідно до його особистих потреб.

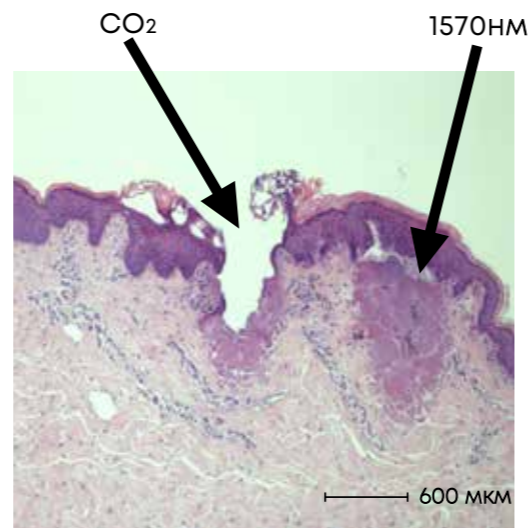

CO₂ і 1570 нм суміжна лазерна генерація – гістологія «ex vivo»

Обидві довжини хвилі лазера здійснюють оптимальний вплив на шкіру, поруч, процедури дуже ефективні, підходять навіть для темніших типів шкіри та з низькою щільністю абляції, що мінімізує час простою.

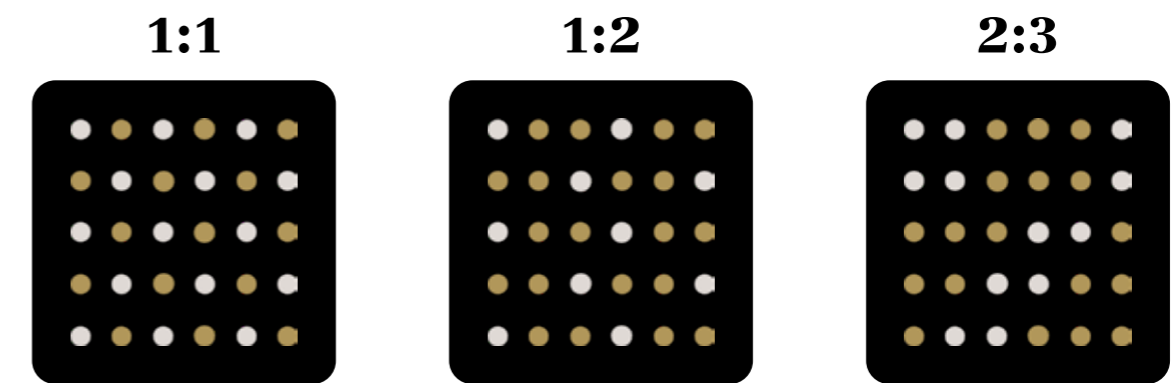

Приклади персоналізованих коефіцієнтів лазерної генерації

● - Лазер 1570 ● - Лазер CO₂

Наші зусилля зосереджені на розумінні елементів, які формують спосіб життя людей сьогодні; їх різноманітні потреби; їх різноманітні бажання. Саме з цим розумінням ми створили «HyGrid™», що, в свою чергу, дозволяє створити збалансований протокол, який відповідає специфіці процедури для кожного конкретного клієнта.

«ProScan» - інструменти майстра


ProScan - Наш флагманський аплікатор


З метою реалізації можливостей «HyGrid™» в повній мірі «Alma» створила високотехнологічний автоматизований сканер «ProScan». Створюючи вирівняні, надшвидкісні послідовно сфокусовані пучки лазерного випромінювання, сканер «ProScan» з ергономічним світлим дизайном забезпечує ефект, який є одночасно абляційним, коагуляційним і тепловим.

Окрім гальванометричного двигуна і дзеркальних поверхонь для сканування «ProScan» має охолоджений наконечник для підвищення безпеки виконання процедури та комфорту пацієнта. Забезпечуючи швидке покриття великих площ поверхні, аплікатор пропонує різноманітні форми та режими сканування для повного налаштування.

Революційний режим «HyGrid» дозволяє мені налаштувати оптимальне співвідношення між абляційними та неабляційними процедурами і отримати максимальний ефект від кожного лазера. Ця унікальна функція гарантує адаптацію моїх процедур до індивідуальних потреб кожного пацієнта, що призводить до поліпшення результатів. Я вважаю це значним кроком вперед з точки зору персоналізації лазерних процедур для шкіри.

Доктор Офір Арці, дерматолог та фахівець з лазерної медицини, керівник Центру естетичної дерматології медичного центру «Сураскі», Тель-Авів, Ізраїль

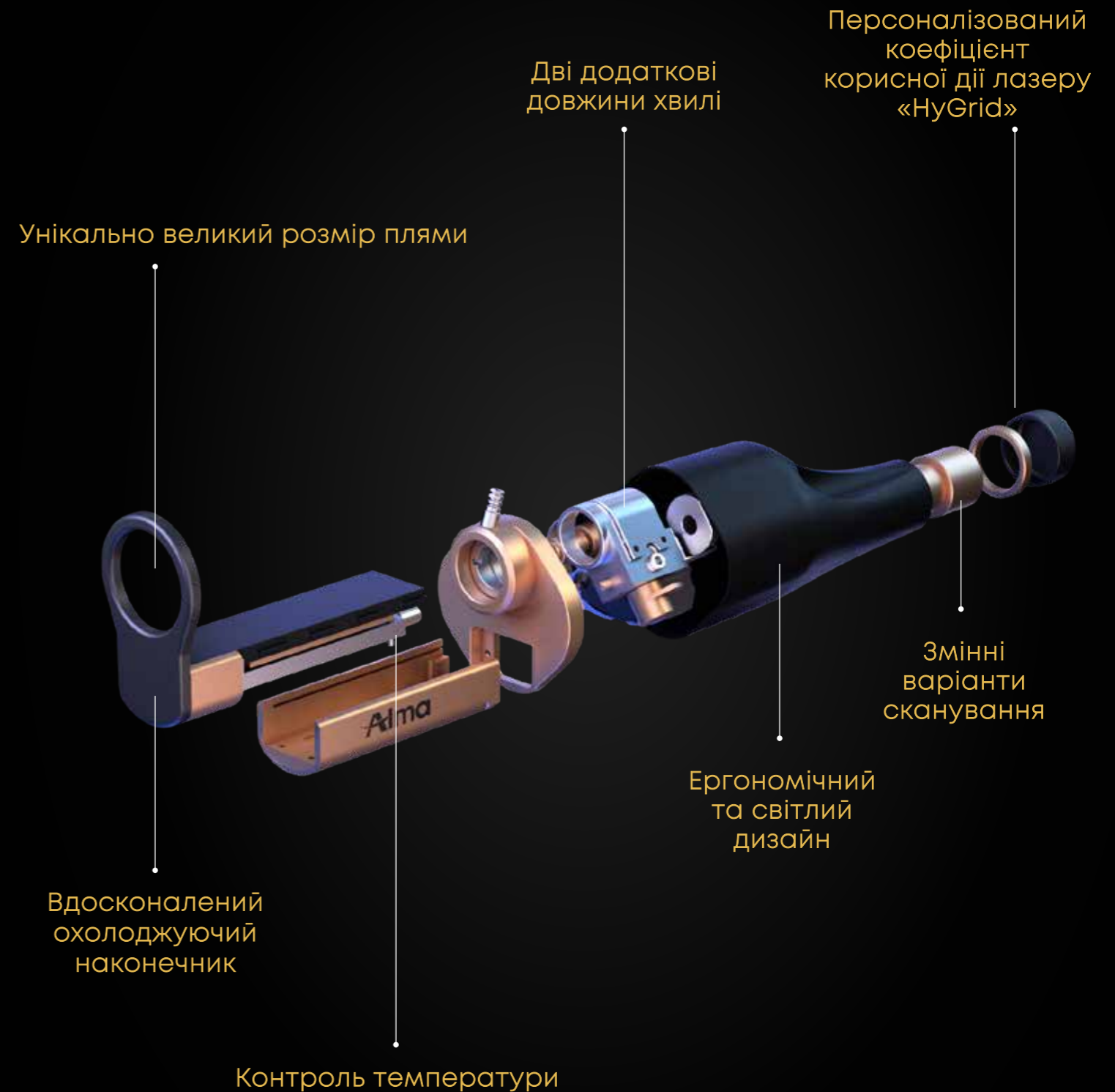

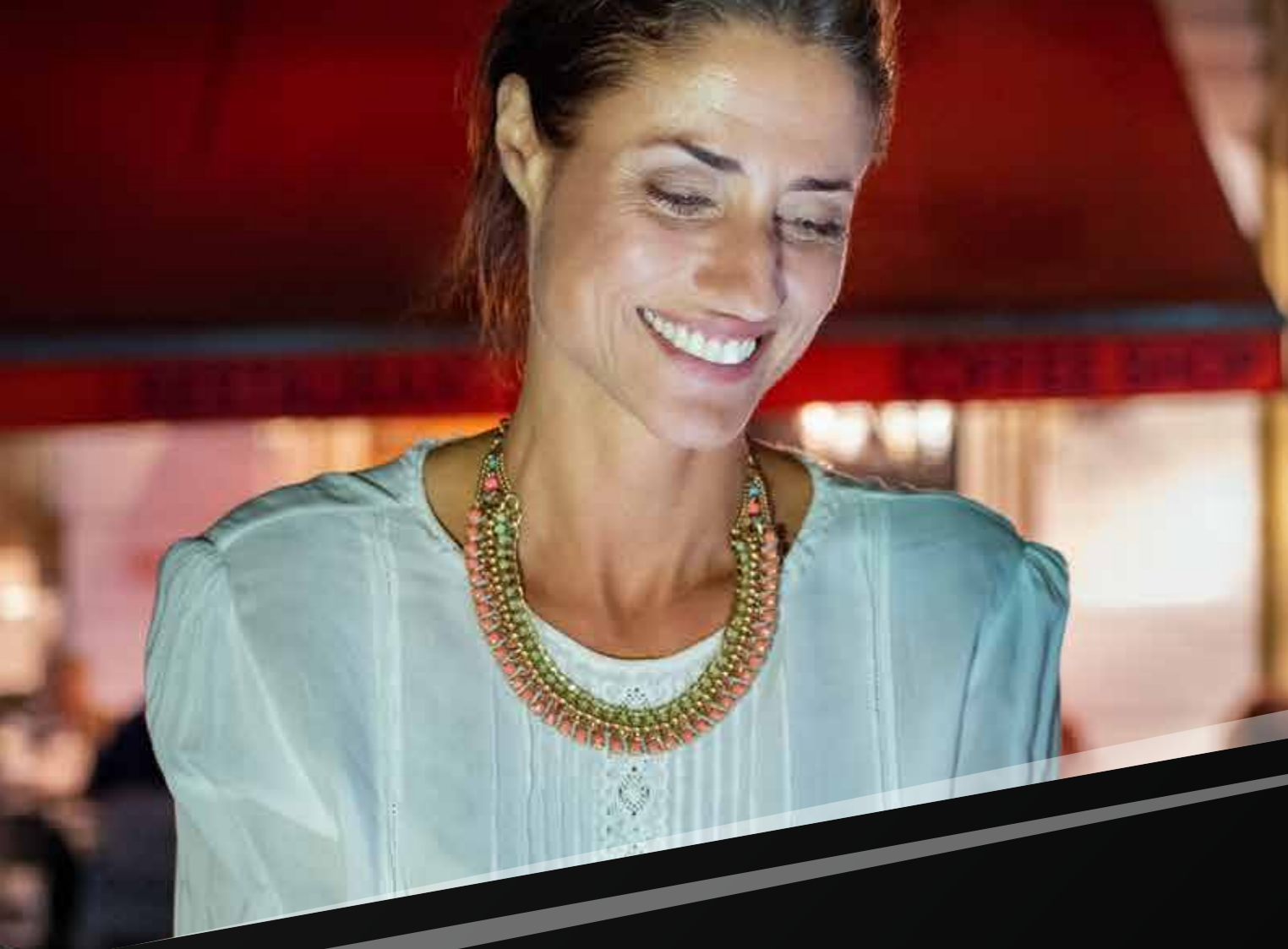

Єдина платформа. Безліч процедур.

Єдина платформа дозволяє Вам запропонувати своїм пацієнтам персоналізовані процедури омолодження шкіри відповідно до їх побажань з повним контролем часу відновлення для задоволення потреб пацієнта. Інноваційна методика лікування шкіри, яку використовує «Alma Hybrid™», включає 3 основних елементи: оптимальну абляцію для ідеального шліфування; остаточний глибокий тепловий ефект для синтезу нового колагену і регенерації дерми; і безпрецедентно ефективну трансепідермальну доставку необхідних для шкіри елементів.

3 провідні процедури «Alma Hybrid»:

CO₂ 1570 IMPACT Підтяжка із застосуванням со. .S70 h Hybrid - супер відновне лікування

Поєднуючи найкращі абляційні і теплові технології з покращеною доставкою косметичних засобів, ця процедура забезпечує безпрецедентні результати з відносно коротким часом простою. Унікальна схема сканування із застосуванням лазерів CO₂ і 1570 нм викликає скорочення шкіри для поліпшення тонких ліній і глибоких зморшок, в той час як ультразвуковий пристрій «IMPACT™» покращує трансепідермальну доставку косметичних засобів. Який же результат? Процедура, яка виконується за один вихідний день, з драматичними результатами, які змушують шкіру виглядати і бути більш гладкою і більш молодю.



До



Після 2 процедур

З люб'язної згоди доктора Офір Арці, дерматолога та фахівця з лазерної медицини, керівника Центру естетичної дерматології медичного центру «Сураскі», Тель-Авів, Ізраїль



«Hybrid OScar» - лікування рубців

«OScar» є основною процедурою для видалення всіх типів рубців, від вугрів і травм до хірургічних рубців. Успішне видалення рубців залежить від проникнення лазерного випромінювання в шар дерми. Завдяки поєднанню довжин хвилі лазера CO2 і 1570 нм ви можете налаштувати різні параметри, включаючи глибину проникнення, ширину коагуляції та щільність для того, щоб персоналізувати оптимальний протокол для кожного окремого клієнта і тип рубця, який має бути видалений. Після завершення виконання процедури із застосуванням «IMPACTTM» ви досягаєте оптимального проникнення косметичних засобів для поліпшення загального результату.



До

Після 4 процедур

З люб'язної згоди доктора Офір Арці, дерматолога та фахівця з лазерної медицини, керівника Центру естетичної дерматології медичного центру «Сураскі», Тель-Авів, Ізраїль



«SoftLift» - процедура омолодження «в обідній час»

«SoftLift» викликає скорочення тонких ліній і зморшок, а також видалення різних уражень шкіри, включаючи шрами від вугрової висипки, практично без простою. Створюючи значний тепловий ефект, потужне, неабляційне 1570 нм лазерне випромінювання сприяє неоколлагенезу, забезпечуючи при цьому відсутність ушкоджень самого епідермісу. Процедура є безпечною навіть для темних типів шкіри (VI), покращує текстуру шкіри, забезпечує молоджавий тон шкіри і зменшує появу тонких ліній та помірних зморшок.



До


Після 3 процедур

З люб'язної згоди «Alma Clinic» (клініка «Альма»)

**Досягайте справжніх
перетворень,
які змушують людей
з кожним днем відчувати
себе і виглядати краще!**

Ми надзвичайно пишаємося запуском на ринок «Alma Hybrid», що є безпрецедентним проривом в омолодженні шкіри і лікуванні рубців. Це інноваційне рішення пропонує практикуючим спеціалістам необмежені можливості, безпрецедентну точність і повний контроль над різноманітним спектром процедур, одночасно використовуючи синергетичні можливості 3 основних джерел енергії для досягнення видатних результатів. Це віха для нас як компанії, а також для всіх медичних працівників, які будуть використовувати виріб, і для пацієнтів, які будуть насолоджуватися неймовірними результатами.

Ліор Даян, генеральний директор компанії «Alma»



СТАНЬТЕ МАЙСТРОМ СВОЄЇ СПРАВИ

Зміни – це природний процес, але він не завжди йде так, як нам подобається. Саме тут з'являється технологія «Alma», яка повертає контроль в наші руки.

Будучи лідерами в сфері медичної естетики, ми надаємо тисячам лікарів можливість допомогти мільйонам пацієнтів пережити по-справжньому неймовірні перетворення.

«Alma» надає можливість виконання максимально ефективною, швидкою і безпечною процедури для кожного пацієнта. А для Вас ми пропонуємо наш клінічний досвід, спеціальну сервісну і маркетингову підтримку, а також інноваційні технологічні розробки для того, щоб створити комплексну систему підтримки, яка приносить вам користь.

У світі, який постійно змінюється, одна річ залишається незмінною: пацієнти повинні знати, що вони отримують найкращий догляд до, під час і після виконання процедури. Наші рішення в ваших руках роблять це можливим.

Alma Lasers GmbH
(Альма Лазерс ГмБХ)
Нордостпарк 100-102
90411 Нюрнберг,
Німеччина
Тел.: + 49 911 / 89 11 29-0
Факс: + 49 911 / 89 11 29-99
Ел. пошта: info@almalasers.com

www.almalasers.com

© 2023 Alma. Всі права захищені

«Alma», її логотип, «Alma Hybrid & HyGrid» є торговими марками та/або зареєстрованими торговими марками «Alma» в Сполучених Штатах та/або інших країнах.

PВАН09092001_04

Зв'яжіться з «ALMA»

